

## **1. Product Name**

Linelite Shower

## **2. Product Code**

18312

## **3. Colour**

Differing colours.

## **4. Brief Description**

Stand amongst or move through the multi-coloured linelite strands.

## **5. Contents**

1 x Linelite shower, ready assembled.

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Touch
- Sight
- Sound

## **7. Best Use**

Use in a darkened environment with an ultra violet light for best effect.

## **8. Compatible ROMPA® Products**

- 20714 - LED Shadow
- 14531, 14532 - Ultra Violet Light
- 18376, 18377 - Low energy black light bulb

## **9. Starting Up**

- Unpack item
- Dispose of packaging safely and responsibly.
- Install linelite shower. Ensure that the item is located in an area where it is accessible and safe. Consider proximity to doors, walls and hazards.
- Secure safely to the ceiling near a UV light.
- Switch off the main lights and switch on the UV light.
- Enjoy the tactile, visual and audible input with the bells.

## **10. Detailed Description**

These cascading strands, suspended from the ceiling offer multisensory input. They have tactile, visual and audible appeal with bells, and when exposed to UV light, these linelite coloured strands react vividly.

## **11. Safety**

- Always supervise the use of this product.
- For use in dry environments only.
- Do not pull on the strands – they can be safely touched and walked through but not pulled on.
- Do not hang anything heavy from the strands

## **12. Technical Specification**

Weight            1.65kg  
Strands:         140cm long

### **13. Installation**

Suspend the Linelite Shower from your ceiling, considering the following points:

1. The Linelite shower weighs approximately 1.65kg – choose fixings (e.g. a screw-in hook) that are appropriate to the construction of your ceiling and to the weight of the product
2. Length – please see specifications
3. There is a cord on the disc to suspend the Linelite Shower with – this measures 92cm – from the loop at one end to the point where the three cords from the disc meet. The cord can be adjusted – tie a knot to form a loop further down the cord as required.
4. The Linelite Shower looks more effective in a darkened environment with an ultra violet light nearby.
5. The Linelite Shower is not electrical – proximity to a wall socket is not required.

### **14. Care and Maintenance**


- Wipe the strands clean as required using a mild household cleaning product.

### **15. Troubleshooting**

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)

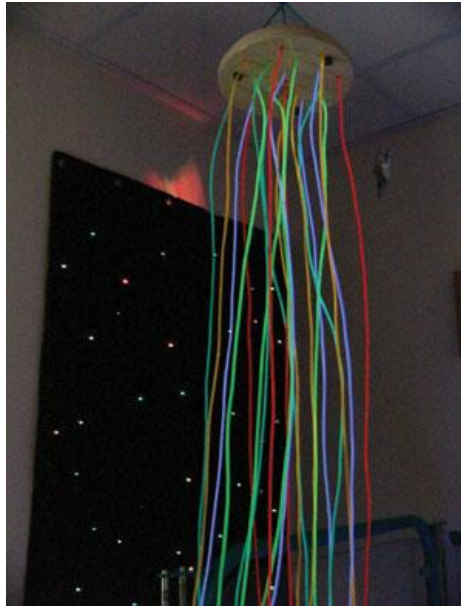

## 1. Produit

Douche de fils fluorescents

## 2. Code

18312

## 3. Couleur

Les couleurs peuvent varier

## 4. Brève Description

Marche sous cette "douche" ou mets-toi en dessous pour sentir et toucher les fils de lumières fluorescents.

## 5. Contenu

- 1 x Douche de fils fluorescents, déjà assemblée

## 6. Stimulations Snoezelen®

- Vue
- Toucher
- Son

## **7. Usage**

Pour l'usage dans l'obscurité avec une lumière ultraviolette

## **8. Produits Compatibles de ROMPA®**

- 20714 – LED Shadow
- 14531, 14532 – Lampe à Ultra Violets
- 18376, 18377 – Lampe Ultra-Violet économique

## **9. Fonctionnement**

- Déballez le produit.
- Jetez l'emballage de façon sûre et responsable.
- Installez la douche dans un lieu sûr.
- Eteignez la lumière principale de la salle et allumez votre lampe UV.

## **10. Description**

Marche sous cette "douche" ou mets-toi en dessous pour sentir et toucher les fils de lumières fluorescents. Une conception simple mais présentant beaucoup d'intérêt. A accrocher dans un espace noir, près d'une lampe ultra-violet pour que les fils aient un effet magique fluorescent.

## **11. Sûreté**

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.
- Pour l'usage au sec.
- Ne pas tirer les fils – on peut les toucher et on peut passer entre les fils mais ne pas les tirer.
- Ne rien attacher aux fils, surtout des objets lourds.

## **12. Caractéristiques Techniques**

Poids:	1.65kg
Fils:	140cm long
Disque :	en bois
Linélite:	PVC d'un calibre médical, sans latex

### **13. Installation**

Suspendez la Douche de votre plafond, se tenant compte des points suivants :

1. La douche pèse approximativement 1,65kg – choisissez des installations (ex. un crochet) qui conviennent à la construction de votre plafond et au poids du produit
2. Les fils de linelite mesurent approximativement 140cm (du disque aux bouts)
3. Il y a une corde sur le disque pour faciliter la suspension de la douche – elle mesure 92cm – du boucle à un bout à la balle rouge en bois qui couvre le noeud des trois cordes du disque. On peut ajuster la longueur de la corde – faites un autre nœud et boucle selon besoin.
4. La douche est à accrocher dans un espace noir, près d'une lampe ultra-violet pour que les fils aient un effet magique fluorescent.
5. La douche n'est pas électrique – on ne nécessite pas une prise d'alimentation...

### **14. Soin et Entretien**

1. Essuyez les fils selon besoin, en vous servant d'un tissu propre et légèrement humecté avec un produit de nettoyage doux.

### **15. En cas de problèmes**

*N'applique pas*